

LiNA MaxFlow™ och LiNA MaxFlow™ Endohook

Kraftfullt sug- och sköljsystem med
elektrokirurgiska tillämpningar



LiNA MaxFlow™ och LiNA MaxFlow™ Endohook

Säker. Utformad för sugning och sköljning.

Sugsond med stödöglor och falskluftgenerator på sughandtaget som är utformat för procedurer som kräver känslig sugning

LiNA MaxFlow™ Endohook

Monopolär endohook med säkringsfunktion för att dra ut elektrodpetsen ur kanylen.

Mångsidig. Olika längder, elektrodpetsar och kirurgiska tillämpningar.

Sugsond finns i 5 mm och 10 mm, och 5 mm utdragen längd (370 mm)

Val mellan enbart sug- och sköljfunktion eller tillägg med elkirurgisk monopolärt tillbehör från LiNA MaxFlow™ Endohook

LiNA MaxFlow™ Endohook

3 olika elektrodpetsar på monopolär endohook



Säkring på/redo för sugning och sköljning



Säkring av/redo för elkirurgi


Klicklåsmekanism




LiNA MaxFlow™ Endohook




Stödöglor

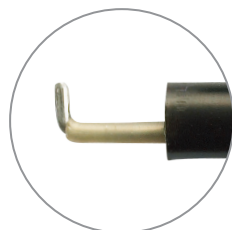


L-formad spets

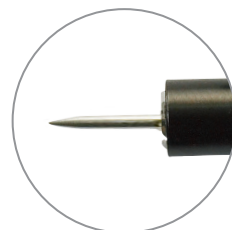

Nålspets

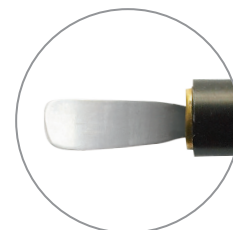

Spatelspets

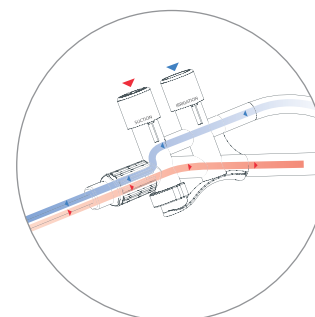

Design med separat kanal

Falskluftgenerator

Funktionell. Fördelaktiga funktioner som uppfyller kirurgiska behov.


Unik design med separat kanal i handtaget för att minska risken för stopp från koagel och annat skräp

Äkta 9 mm direkt flöde i hela sugsystemet vid användning med en 10 mm sond under sug- och sköljproceduren

Inget behov av byte av instrument under kirurgiska procedurer som sugning, sköljning, dissikering, koagulering och skärning med ett och samma instrument!



LiNA MaxFlow™ och LiNA MaxFlow™ Endohook

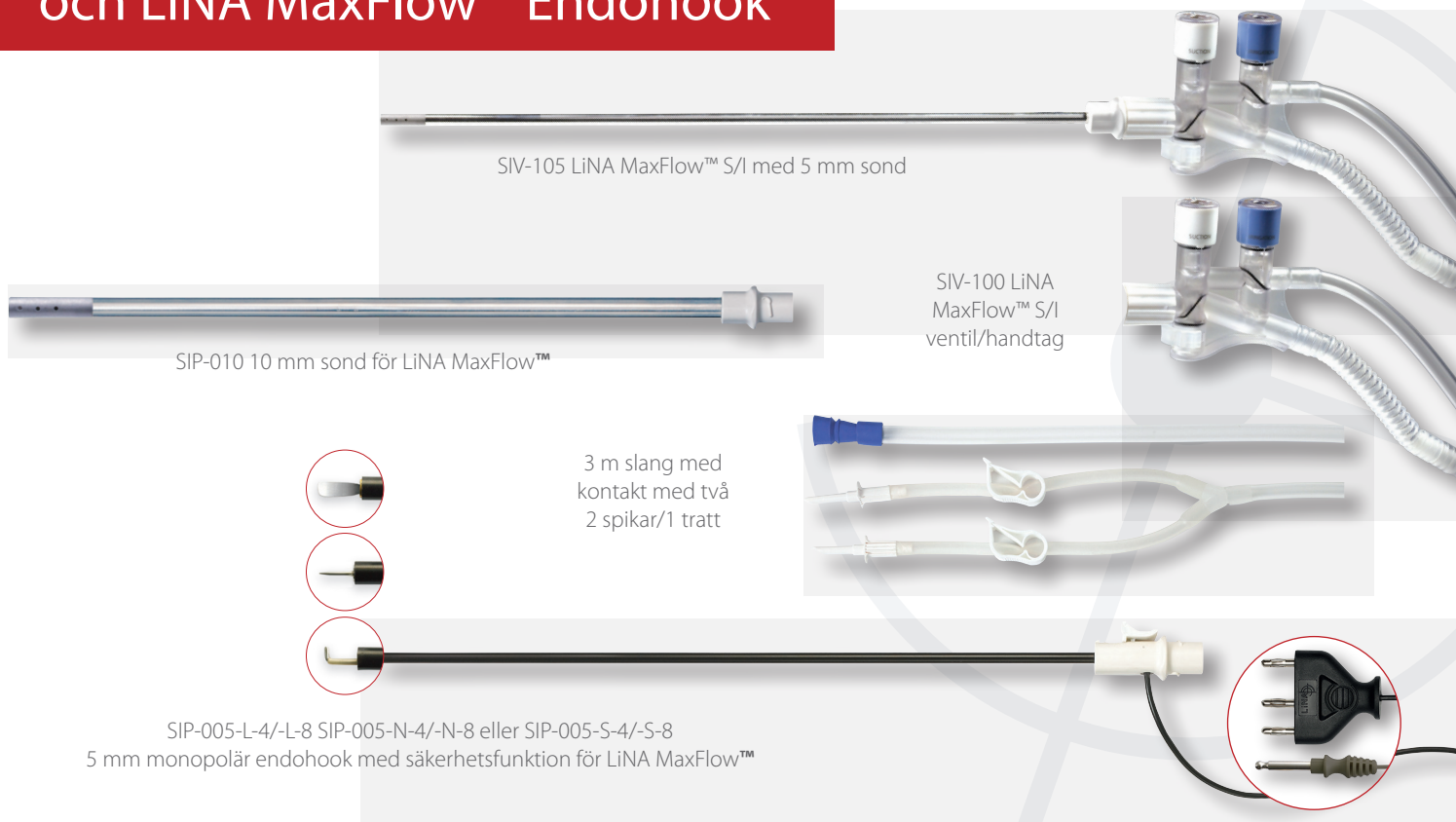

Beställningsinformation:

LiNA MaxFlow™ **CE**
0459

Produktkod	Beskrivning	ANTAL
SIV-100	LiNA MaxFlow™ (endast ventil) – 3 m slang med pluskontakt med 2 spikar. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIV-105	LiNA MaxFlow™ sug-/sköljset – med 5 mm sond, 3 m slang och pluskontakt med 2 spikar. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-370	5 mm sond, utdragen längd (370 mm). Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-010	10 mm sond. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-L-4	LiNA MaxFlow™ Endohook – endoskopisk monopolär krok för LiNA MaxFlow™, 3 m kabel, 3-stiftskontakt, L-formad spatelselektrod. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-L-8	LiNA MaxFlow™ Endohook – endoskopisk monopolär krok för LiNA MaxFlow™, 3 m kabel, 8 mm kontakt, L-formad spatelselektrod. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-S-4	LiNA MaxFlow™ Endohook – endoskopisk monopolär krok för LiNA MaxFlow™, 3 m kabel, 3-stiftskontakt, spatelselektrod. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-S-8	LiNA MaxFlow™ Endohook – endoskopisk monopolär krok för LiNA MaxFlow™, 3 m kabel, 8 mm kontakt, spatelselektrod. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-N-4	LiNA MaxFlow™ Endohook – endoskopisk monopolär krok för LiNA MaxFlow™, 3 m kabel, 3-stiftskontakt, nålspetselektrod. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.
SIP-005-N-8	LiNA MaxFlow™ Endohook – endoskopisk monopolär krok för LiNA MaxFlow™, 3 m kabel, 8 mm kontakt, nålspetselektrod. Steril, för engångsbruk.	Kartong med 10 st.

Distributör:

©2022 LiNA Medical ApS. Med ensamrätt.

LiNA är ett registrerat varumärke som tillhör LiNA Medical i EU, USA och Kina.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Danmark

• Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

EN ISO 13485:2016
Kvalitetsstyrningssystem

